

# CAMILLA DE ESPÁTULA O SCOOP C3

SKU: CAM016

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



La camilla de espátula de plástico o scoop C3 se utiliza para inmovilizar y trasladar a pacientes de forma segura, permitiendo recogerlos sin necesidad de moverlos, lo que es ideal para situaciones de emergencia y rescate, especialmente en casos de posibles lesiones de columna.

## MATERIALES

Polímero de alta resistencia, moldeado.  
Estructura de aluminio.

## COLORES

Camilla Tubular  
Amarillo Aluminio

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS



Orificios que permiten un agarre fácil en los extremos de la camilla, también diseñados para que se puedan sujetar los accesorios de inmovilización.

De fácil limpieza y desinfección.



Capacidad de carga de 160 kg.

Impermeable a los líquidos.



Peso neto de 8 Kg.

3 dimensiones de longitud ajustable a la altura del paciente:  
Longitud A: 176 cm  
Longitud B: 188 cm  
Longitud C: 200 cm



Doble mecanismo de bloqueo de seguridad.

Inmovilización del paciente en la posición que ha sido encontrado, minimizando los movimientos de la columna vertebral.



Fácil de doblar para almacenar.




Marco inferior para los pies estrecho para mejor manejo de espacios reducidos.

Dispositivo para manipular al paciente sin necesidad de rotarlo y levantarlo.




Desacople de ambos extremos para sacar suavemente al paciente.

## MEDIDAS

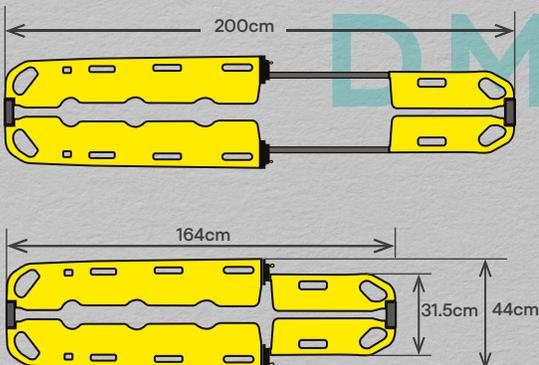

## APLICACIÓN

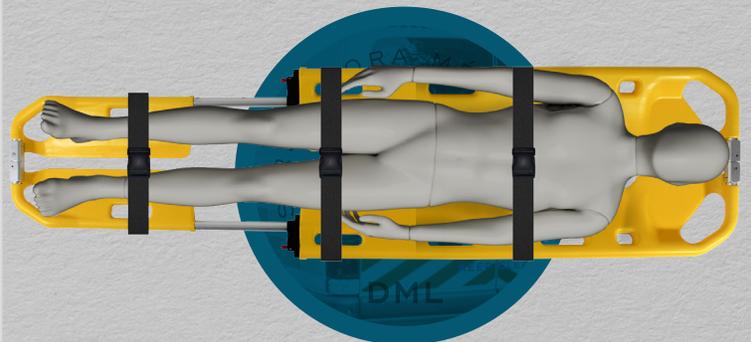

Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)



[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)