

COLLARÍN CERVICAL TIPO AMBU

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



El collarín cervical tipo ambu es un dispositivo médico diseñado para proporcionar estabilización y soporte a la columna cervical (cuello) en casos de lesiones traumáticas, afecciones médicas que requieren inmovilización. Su principal función es limitar los movimientos del cuello, lo que ayuda a prevenir lesiones adicionales.

MATERIALES

Polietileno moldeado por inyección. Cubierta con forro de espuma.

COLORES

Estructura

Forro





CERTIFICACIONES







CARACTERÍSTICAS



Collarín regulable que une los 4 tamaños para adulto en uno solo.



16 Micro ajustes.



No contiene látex.



Orificio con abertura traqueal para facilitar la intubación.



Traslucido para rayos X, tomografía computarizada, e imágenes por resonancia magnética.

Se coloca al paciente en **3 pasos:** Ajusta el tamaño, bloquea y coloca.



Posee ganchos para asegurar el **tubo de oxígeno**



Cuenta con dos botones de bloqueo.



Cierre con velcro de fácil ajuste.



Una sola pieza sin montajes, colocación fácil y rápida.



Almacenamiento plano.





Fabricado en material hipoalergénico.





MEDIDAS



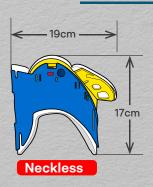

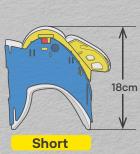

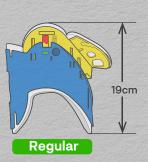

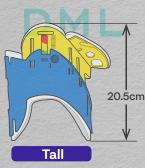



Calle Desarrollo Industrial 201, Colonia industrial las Cruces CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina 477 529 8371 Whatsapp 477 724 6681







MODO DE USO

Desbloquea los seguros jalando los 2 botones que se encuentran en la parte frontal; Para ajustar solo deslice hacia arriba la sección amarilla del collarín.

Una vez que tenga la medida deseada, apriete los botones para bloquear los seguros.


Coloca al usuario.

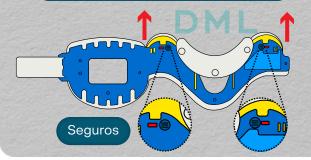


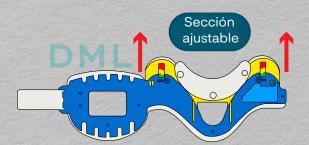




APLICACIÓN

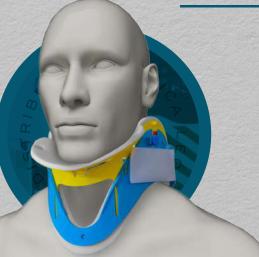

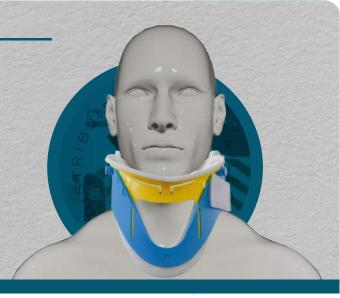

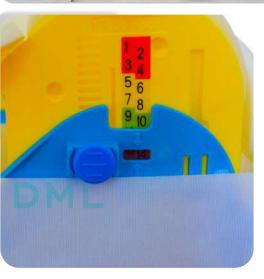







Calle Desarrollo Industrial 201, Colonia industrial las Cruces CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina 477 529 8371 Whatsapp 477 724 6681



