

COLLARÍN CERVICAL TIPO AMBU PEDIÁTRICO

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.

El collarín cervical tipo ambu pediátrico es un dispositivo médico diseñado para niños que proporciona **estabilización y soporte** a la columna cervical (cuello) en casos de lesiones traumáticas, afecciones médicas que requieren inmovilización. Su principal función es limitar los movimientos del cuello, lo que ayuda a **prevenir lesiones** adicionales.

MATERIALES

Polietileno moldeado por inyección.
Cubierta con forro de espuma.

COLORES

Estructura Forro
Amarillo Blanco

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Collarín regulable que une los 4 tamaños para adulto en uno solo.

Se coloca al paciente en 3 pasos:
Ajusta el tamaño, bloquea y coloca.



12 Micro ajustes.

Posee ganchos para asegurar el tubo de oxígeno



No contiene látex.

Cuenta con dos botones de bloqueo.



Orificio con apertura traqueal para facilitar la intubación.

Cierre con velcro de fácil ajuste.



Una sola pieza sin montajes, colocación fácil y rápida.



Almacenamiento plano.





Traslucido para rayos X, tomografía computarizada, e imágenes por resonancia magnética.


Fabricado en material hipoalérgico.




MEDIDAS

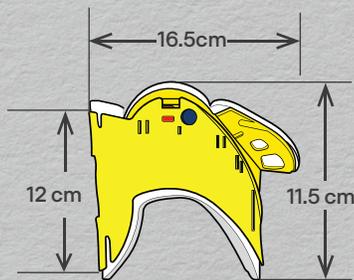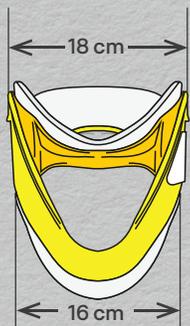

Infant

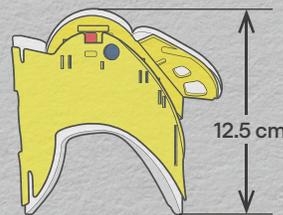

Pediatric

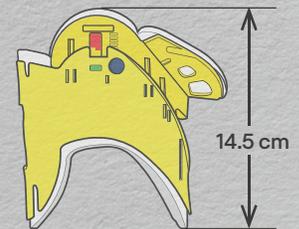

SM Adult



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com






ventas@dml-medica.com
iarenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com

MODO DE USO


Desbloquee los seguros jalando los 2 botones que se encuentran en la parte frontal ; Para ajustar solo deslice hacia arriba como indica la imagen.

Una vez que tenga la medida deseada, apriete los botones para bloquear los seguros.

Coloca al usuario.

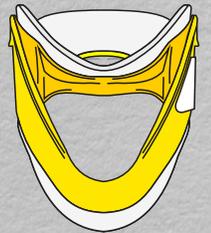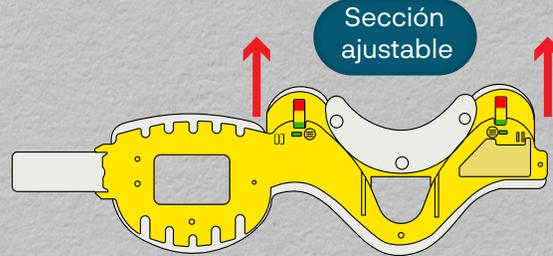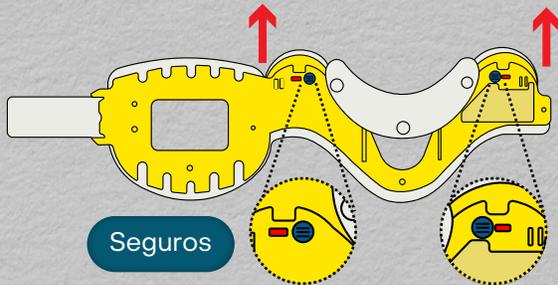

APLICACIÓN

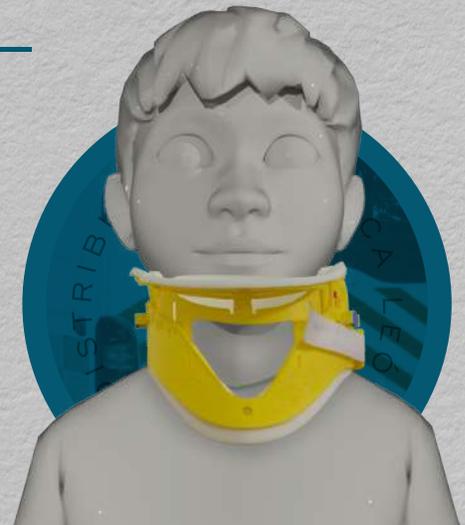

Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com